

## リモート解凍コール

離れた場所で解凍終了を受信




受信機（電波到達距離 40m）



送信機（解凍器と接続）

## クリオ解凍 アップグレード

付属の"クリオ解凍パッド"にクリオ製剤を収納して解凍（所要時間約 10 分，最大 4 本）  
CRYOSEAL®SYSTEM（旭化成メディカル）解凍実績あり（所要時間 25 分，最大 4 組）  
"クリオ解凍" および "CRYOSEAL" 解凍モードを追加インストール（ボタンひとつで切り替え）

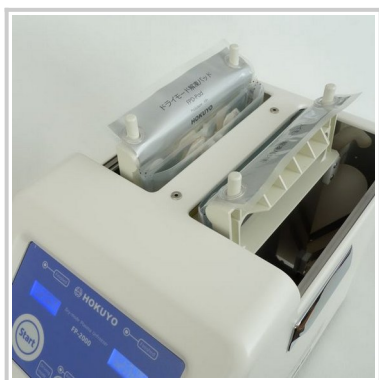

クリオ解凍パッドが 2 組付属



クリオ製剤 2 本まで収容



シリンジセット 2 組まで収容

## 高速解凍 アップグレード

FFP 標準解凍モードと比較して約 20%高速化（480mL で 5-6 分の短縮）  
"高速解凍" モードを追加インストール（ボタンひとつで切り替え）

※ CRYOSEAL® は旭化成メディカル株式会社の登録商標です  
※ 各アップグレードは新規購入時でもご購入後でも実装可能です

## 文献等

- 第 72 回 日本輸血細胞治療学会学術総会，O-81 「乾式解凍によるクリオプレシピテート融解への取り組み」（東京都立墨東病院）
- 第 72 回 日本輸血細胞治療学会学術総会，O-94 「乾式 FFP 高速解凍モードの検討」（福島県立医科大学附属病院）